

# EL&FLEX



**EN NY GENERATION ELRULLSTOLAR**

# VARFÖR VÄLJA ELOFLEX?

Med Eloflex kan du återta kontrollen över ditt liv och återupptäcka friheten att njuta av promenader, resor och utflykter med din egen bil. Äntligen finns det en praktisk och användbar elrullstol, designad i Sverige av rullstolsanvändare, för att göra ditt liv enklare och mer bekvämt. Våra flexibla elrullstolar och elskotrar kan enkelt förvaras i garderoben, ger

dig möjlighet att använda vanliga taxitjänster, boka flyg och tåg och fortsätta använda din egen bil eller en hyrbil när du är på semester. Eloflex är precis vad alla elrullstolar borde vara. Upplev skillnaden med Eloflex och upptäck friheten på nytt!

## HOPFÄLLBAR

Eloflex är en helt ny generation hopfällbara elrullstolar med unika egenskaper. Den fälls ihop med ett enkelt handgrepp vilket innebär att den tar lite plats, både hemma och i bilen, och den exceptionellt låga vikten gör den lätt att ta med. Med Eloflex får du tillbaka din frihet, en frihet som du kan fälla ihop och ta med dig överallt.



## LÅG VIKT

En elrullstol från Eloflex väger upp till 80% mindre än en traditionell elrullstol. Att den dessutom är hopfällbar med ett enkelt handgrepp innebär en oslagbar kombination. Den låga vikten och det kompakta formatet gör den enkel att lasta in i egen bil. Äntligen slipper du vara beroende av Färdtjänst och Handikaptransporter. Eloflex ger dig friheten tillbaka.

## MODERN TEKNOLOGI

Eloflex är utvecklad med den senaste tekniken. Högeffektiva batterier med Litiumteknologi är överlägsna de gamla blybatterierna, både till prestanda och i form av lägre vikt. De kraftfulla borstlösa motorerna som monterats direkt på respektive hjul är både tystare och effektivare än de motorer som används på traditionella elrullstolar.



## PÅ RESA

Eloflex hopfällbara elrullstolar är perfekta för resan, utflykten med bilen och taxiresan på semester målet. Nu kan du hälsa på barnbarnen eller släkt och vänner på dina egna villkor.

# EN NY GENERATION ELRULLSTOLAR

Eloflex är en smart elrullstol som passar alla. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, stark eller svag. Med en Eloflex får du utökad frihet hemma och på resan och slipper vara beroende av

andra. Den låga vikten gör den lätt att lasta in i din egen bil. Äntligen slipper du vara beroende av färdtjänst.

## OBEROENDE FRIHET

Det är lätt att förstå hur en Eloflex på ett positivt sätt kan påverka vardagen för många människor. En hopfällbar lätt elrullstol är perfekt att ta med i bilen och på resan. En möjlighet som tidigare inte fanns eftersom normala elrullstolar väger mellan 80-150 kg och inte går att fälla ihop.

Den kompakta utformningen och den höga körkomforten sätter dessutom inga begränsningar väl ute. Du tar dig enkelt runt i parken, på stan, i butiken och på ett kafé eller restaurang.

Moderna flyggodkända batterier gör att du kan ta med din Eloflex även på flygresan.



## KOMPAKT & SMIDIG

En traditionell elrullstol är stor, klumpig och väger ofta över 100 kg. Den är omöjlig att ta med i bilen och den tar mycket plats hemma och när man kör den. Men så behöver det inte vara. Eloflex är en ny modern typ av elrullstol gjort av aluminium eller kolfiber. Du fäller ihop en Eloflex med ett enkelt handgrepp vilket innebär att den tar lite plats, och den exceptionellt låga vikten gör den lätt att ta med i din egen bil.

Tack vare kompakta mått, bakhjulsdrift och samma sittkonstruktion som en manuell rullstol erhålls liknande prestanda. Vändradien är liten, precisionen hög. Äntligen finns det en liten och smidig elrullstol som tar sig fram på trånga platser och genom smala dörrar. Eloflex är en ny generation elrullstolar med låg vikt och slimmad bredd.



Lätt att lasta – enkel att ta med

**EXTREMT LÅG VIKT**



Säker konstruktion med 2 års garanti

**HÖG KVALITET**



Dubbla batterier för extra trygghet

**LÅNG RÄCKVIDD**

# MODEL F

Eloflex F är marknadens mest populära elrullstol. Med unika egenskaper som hopfällbar, kompakt och en aluminiumram med låg vikt har den förändrat hjälpmedelsbranschen. Eloflex Modell F har gett friheten tillbaka till tusentals användare som har svårt att gå.

Det här är en allroundmodell som passar de allra flesta oavsett ålder, behov och användningsområde. Den moderna tekniken med borstlösa kraftiga motorer och dubbla litiumbatterier som standard ger överlägsna köregenskaper och en körsträcka på över 30 km.



VIKT I KG

26

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

52

MAX BRUKARVIKT I KG

120

EFFEKT I WATT

2X 250

# MODEL L

Eloflex L är en kompakt modell för dig som värdesätter smidighet. Den är hopfällbar på några sekunder och du kan enkelt ta med dig elrullstolen på bilresan och flygsemestern.

Eloflex modell L är ett bra val för dig som gillar trygghet. Du slipper pumpa och behöver aldrig oroa dig för punktering tack vare solida däck. Det smidiga formatet är extra fördelaktigt i inomhusmiljöer och du navigerar enkelt genom smala dörröppningar och i trånga utrymmen.



VIKT I KG

25,5

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

52

MAX BRUKARVIKT I KG

120

EFFEKT I WATT

2X 200

# MODEL P

Eloflex P har en elektrisk tiltfunktion på sitsen som underlättar i och urstigning. Modell är framtagen för den som har svårt att resa sig ur en vanlig stol. Med elektrisk lyfthjälp blir förflyttningen både enklare och säkrare. Den elektriska sitslyften gör det dessutom enklare att nå högre upp i skåp och hyllor både hemma och i butiker.

Modell P har högre sitthöjd än våra övriga modeller vilket underlättar urstigningen ytterligare. Eloflex P lämpar sig därför också utmärkt för lite längre användare på grund av sin sitthöjd och möjligheten att höja ryggstödet steglöst.



VIKT I KG

28

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

54

MAX BRUKARVIKT I KG

160

EFFEKT I WATT

2X 250

# MODEL D2

Eloflex D2 är en innovativ hopfällbar elrullstol. Den har samma smidiga design som våra andra elrullstolar men med en smart konstruktion som gör att den kan tas isär i två delar. De två delarna ger en lastvikt på 14 respektive 16 kg vilket underlättar vid transport och när stolen ska lastas in i bilens bagageutrymme.

Den stabila modellen D2 passar brukare upp till 160 kg och är bekväm samt enkel att manövrera. Eloflex D2 hjälper dig att leva ett aktivt liv med promenader, resor och vardagsutflykter.



VIKT I KG

14 + 16

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

50

MAX BRUKARVIKT I KG

160


EFFEKT I WATT

2X 250

# MODEL H

I Eloflex modell H har vi gjort det omöjliga. En kraftig elrullstol, speciellt framtagen för våra tyngre och längre användare, som klarar brukare på upp till 200 kg men som samtidigt går att fälla ihop och som man kan ta med i en vanlig bil.

Modell H är en rymlig stol med fantastiska köregenskaper och gott om plats för den fullvuxne. Modellen ger flexibelt användande tack vare väl tilltagen sittbredd, generös sitthöjd och en konstruktion som ger bekväm körställning även för de allra längsta.

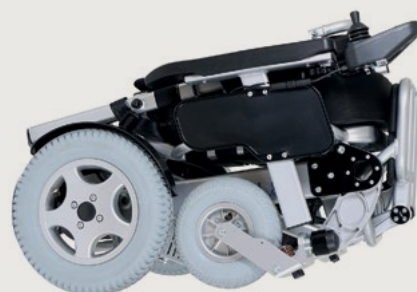

VIKT I KG

43

RÄCKVIDD I KM

40

SITTHÖJD I CM

54

MAX BRUKARVIKT I KG

200

EFFEKT I WATT

2X 400

# MODEL K

Eloflex K är en liten, lätt och hopfällbar elrullstol för barn och ungdomar mellan 7 och 15 år. Modell K ger barn och unga friheten att vara delaktiga i det som händer omkring dem. Den gör det lättare att delta i vardagsaktiviteter så som skolresor, shopping, restaurangbesök, utflykter och besök hos vänner och familj helt utan specialanpassad transport.

Modell K är liten och lätt och har samma eleganta design som de andra Eloflex-modellerna. Stolen är designad så att användare kan växa med stolen. Den kan enkelt justeras i höjd och bredd för att passa barnets behov. Modell K är enkel att köra, vilket gör att små barn (från 7 år) också kan ta sig runt på egen hand.



VIKT I KG

26

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

47-52

MAX BRUKARVIKT I KG

90

EFFEKT I WATT

2X 250

# MODEL Z

Eloflex Z är vår, och marknadens mest exklusiva hopfällbara elrullstol. Den här modellen är för dig som vill ha det bästa av det bästa och som ställer extra höga krav på ditt hjälpmedel. Ramen är gjord i kolfiber vilket resulterar i en unikt låg vikt på 23 kg. Formatet är kompakt, smidigt och hopfällbar.

Den genomtänkta konstruktionen och de smarta detaljerna ger marknadens bästa inställningsmöjligheter för optimal individanpassning. Oslagbara köregenskaper, extrem räckvidd på upp till 45 km och exceptionell driftssäkerhet är bara några exempel på modellens unika kvaliteter. Eloflex Z är elrullstolen för dig som vill ha allt och som inte nöjer dig med något annat än det bästa.



VIKT I KG

20

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

52

MAX BRUKARVIKT I KG

120

EFFEKT I WATT

2X 250

# MODEL C3

Eloflex C3 kombinerar de mest uppskattade funktionerna hos en Eloflex med den avancerade fördelarna med en kolfiberkonstruktion, vilket gör den otroligt lätt och till en perfekt följeslagare i vardagen.

Eloflex C3 väger bara 20 kg och har en stilren design som tillsammans med robusta hjul och kraftfulla Eloflex-motorer ger en enastående smidig körupplevelse. Med en max användarvikt på 160 kg och utrymme för extra batterier är Eloflex C3 utvecklad för att uppfylla och överträffa alla dina förväntningar samtidigt som den erbjuder både tillförlitlighet och ökad mobilitet.



VIKT I KG

20

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

55

MAX BRUKARVIKT I KG

160

EFFEKT I WATT

2X 250

# MODEL X

Eloflex X har en unik konstruktion speciellt framtagen till våra äldre användare. Eloflex Modell X är marknadens mest populära senior-elrullstol. Grundkonstruktionen bygger på den väl beprövade och uppskattade kryss-tekniken. Stolen viks enkelt ihop genom att man lyfter i sitsen.

Eloflex X är resultatet av alla kommentarer, synpunkter och önskemål som vi fått från våra äldre användare de senaste åren. En renodlad seniormodell med alla de funktioner och lösningar som man kan önska sig.



VIKT I KG

25

RÄCKVIDD I KM

25

SITTHÖJD I CM

51

MAX BRUKARVIKT I KG

120

EFFEKT I WATT

2X 250

# MODEL S1

Med Eloflex revolutionerande och unika hybridskoter kan du ta dig fram både ute och inne samt transportera skotern i bilen eller ta med den på flyget. Det ger dig möjligheten att ta långa promenader, handla, träffa vänner och familj samt resa.

En lätt skoter som är enkel att ta med sig, men som också kan köras utomhus i svårare terräng. Eloflex S1 är framtagen för att klara av alla årstider, även vinterhalvåret i det tuffa nordiska klimatet.



VIKT I KG

37,5

RÄCKVIDD I KM

30

SITTHÖJD I CM

55-60

MAX BRUKARVIKT I KG

120

EFFEKT I WATT

2X 250



# TILLBEHÖR

---

Gör din Eloflex ännu smartare och anpassa den efter dina egna, individuella behov med våra populära och smarta tillbehör.



## ELOFLEX PREMIUMDYNOR

Ease by Eloflex är en serie svensktillverkade tillbehör som optimerar ditt Eloflexanvändande.



## SIDOVÄSKA

Med Eloflex sidoväska kan du förvara exempelvis plånbok, telefon eller andra värdesaker som behöver vara lättåtkomliga.



## RESEÖVERDRAG

Skyddsväskan är det perfekta tillbehöret för dig som vill vara lite extra rädd om din Eloflex vid transport, när du checkar in på flyget eller lastar stolen i bilen.



## NACKSTÖD

Nackstödet gör din Eloflex mer individanpassad och användbar, även för de användare som behöver lite extra stöd för huvud och nacke.




## VÅRDARSTYRNING

Tack vare vår vårdarstyrning kan personer som går bakom eller bredvid rullstolen köra rullstolen med hjälp av joysticken, så att den sittande personen enkelt kan åka med.



## JOYSTICKFÖRLÄNGNING

Eloflex har två varianter av förlängningar till joysticken för att passa alla tänkbara behov.

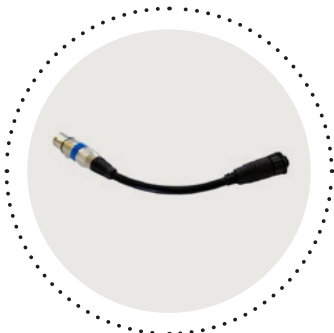

## LADDADAPTER

Eloflex laddningsadapter gör att du kan ansluta laddaren direkt till batteriet.



## JUSTERBART FOTSTÖD

Vårt justerbara fotstöd gör att du kan finjustera fotplattans vinkel från 0 till 90 grader.



## LASTRAMPER

Lasta enkelt in din Eloflex i bilen med hjälp av lastramper som är hopfällbara och lätta att lyfta.

# EASE FÖRBÄTTRAR DIN ELOFLEXUPPLEVELSE

Ett långvarigt sittande kan ibland innebära problem som ömhet i rumpa och rygg, hudirritation, kramp eller i värsta fall sår. Med komfortprodukterna från Ease förebygger du problem och undviker trycksår. Ease produkter lindrar också smärta och minskar existerande problem.

Vi vill att du ska kunna uppleva ännu mer. Ease har tagits fram för den aktiva användaren som sitter långa stunder och som vill ha ett ökat välbefinnande på utflykten, resan eller i det vardagliga livet.

## PREMIUMDYNA - EASE ONE

Ease One är en mjuk och komfortabel premiumdyna för personer som sitter långa stunder. Dynan har fjäderkassetter i sittgropen vilka fördelar trycket under sittbensknölar och svanskota. Formen på dynan bidrar också till ökat stöd och stabilitet för låren. Ease One används med fördel i elrullstol eftersom fjädringen skonar rygg och svanskota vid ojämna underlag.

## PREMIUMDYNA - EASE WEDGE

Ease Wedge är en kilformad sittedyna som är förhöjd i framkant. Den är speciellt anpassad för att ge användare med längre ben ökad komfort vid långvarigt sittande. Den bekväma och tryckfördelnde dynan ger en mjuk känsla som avlastar både lårbenen, sittbensknölar och svanskotan.

## EASE ARMSTÖDSKUDDE

Ease Rest är ett mjukt överdrag till armstöden på din Eloflex. Det mjuka skummet är 1 cm tjockt och ger dig skydd från vibrationer samtidigt som det minskar risken för trycksår och irritation. Ease Rest minskar även risken för att armen glider av armstödet.

## EASE RYGGSTÖDSVADDERING


Ease Tube är ett mjukt skumöverdrag till ryggstödet på din Eloflex. Tube ger en mjukare och behagligare känsla när du lutar dig tillbaka i din Eloflex. Du får extra stöd och komfort för ryggen vid körning på ojämna underlag.

## EASE SVANKSTÖD

Ease Lumbar Support är ett ergonomiskt utformat svankstöd i viskoelastiskt skum. Svankstödet formar sig efter din kropp och ger dig en mjuk känsla och minskad trötthet i ryggen.

## EASE INKONTINENSSKYDD

Att hantera inkontinens när man sitter i rullstol ska inte behöva vara stressigt eller komplicerat. Vårt vattentäta inkontinensskydd förenklar och säkrar din vardag och ger ett utmärkt skydd även mot regn och fukt när du är utomhus.

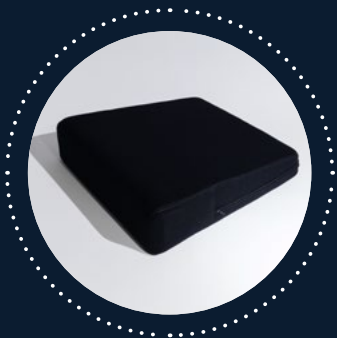

När livet plötsligt förändras

# MARIE FANN SANN FRIHET MED ELOFLEX

---



**Hopptimisten, eller Marie Hav Lunkvist som hon egentligen heter, har en bakgrund som aktiv affärskvinna och sitter idag i rullstol på grund av sjukdom. Hon ser livet som en gåva och hon är fylld av både hopp och optimism!**

Jag fick min Eloflex i februari 2018, jag hade då haft andra rullstolar i cirka sex år. Jag är en aktiv person som reser mycket med mina föreläsningar och jag är engagerad i många olika samhällsuppdrag både privat och med familjen. Jag reser både till fjällen och åker på skärgårdsresor, och det blev fort helt nödvändigt för mig att ha en smidig och lätt elrullstol vid dessa tillfällen.

Det är inte bara när jag reser som Eloflexen är med mig, utan allt från att inte komma in i trånga butiker eller en sådan vardaglig sak som att grannens dörr är för smal för min vanliga elrullstol, är ett minne blott nu. Jag behöver inte längre oroa mig för att inte kunna göra vad jag vill, när jag vill och på mina egna villkor. Det är frihet på riktigt!



# TEKNISKA SPECIFIKATIONER

MODELL	F	L	P	D2	H	K	C	Z	C3	X	S1
<b>NETTOVIKT</b>	27 kg	25,5 kg	30 kg	14+16 kg	42,5 kg	28,5 kg	16 kg	23 kg	20 kg	25 kg	37,5 kg
<b>RÄCKVIDD</b>	30 km	30 km	30 km	30 km	40 km	30 km	15 km	30 km	30 km	25 km	30 km
<b>MAX ANVÄNDARVIKT</b>	120 kg	120 kg	160 kg	160 kg	200 kg	90 kg	100 kg	120 kg	160 kg	120 kg	120 kg
<b>HASTIGHET</b>	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	8 km/h	6,5 km/h	6 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	6,5 km/h	9 km/h
<b>BATTERI</b>	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 20AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 12AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V	2x Litium ION 10AH/24V
<b>SVÄNGRADIE</b>	78 cm	76 cm	85 cm	89 cm	99 cm	78 cm	60 cm	78 cm	87 cm	88 cm	100 cm
<b>HJUL FRAM</b>	8" solid	8" solid	8" solid	8" solid	9" air	8" comfort	7" solid	8" comfort	10" air	8" solid	12" air
<b>HJUL BAK</b>	12" air	10" solid	12" air	12" air	13" air	12" air	8,5" solid	12" air	12" air	12" air	12" air
<b>SITTHÖJD</b>	52 cm	52 cm	54 cm	50 cm	54 cm	47-52 cm	47,5 cm	52 cm	55 cm	51 cm	55-60 cm
<b>SITTBREDD</b>	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm	51/56/61 cm	36-44 cm	44 cm	49 cm	43 cm	45/50/55 cm	45/50/55 cm
<b>SITTDJUP</b>	43-48 cm	43-48 cm	43-48 cm	44-47 cm	51 cm	36 cm	42 cm	45 cm	44 cm	43-48 cm	40 cm
<b>STORLEK (HXBXD)</b>	95x63x100 cm	95x59x99 cm	90x62x107 cm	96x62x107 cm	103x66x115 cm	89x63x100 cm	93x57x93 cm	100x62x110 cm	95x63x100 cm	100x62x102 cm	91x63x105 cm
<b>STORLEK HOPFÄLLD (HXBXD)</b>	75x63x40 cm	70x59x35 cm	74x62x40 cm	67/52x63/63x50/35 cm	83x66x45 cm	75x55x36 cm	79x57,5x32,5 cm	75x64x37 cm	75x63x40 cm	76x32x78 cm	55x63x105 cm

Nettovikten inkluderar inte batterier. Rekommenderat lufttryck för luftfyllda hjul = 2,5 kg. Eloflex är klassad som medicinteknisk produkt hos svenska Läkemedelsverket och uppfyller tillämpliga krav i EU:s förordning (2017/745), Medical Device Regulations (MDR), som säkerställer medicintekniska produkters säkerhet och prestanda. Den är CE-godkänd, testad och godkänd enligt EN12184, ISO-7176, IEC-60601 och batterierna är flyggodkända enligt UN38.3.

Besök [www.eliflex.eu](http://www.eliflex.eu) för att hitta lokal information, videor, bilder och din närmaste återförsäljare.

**EL&FLEX**  
THE SMART WHEELCHAIR FOR ANY OCCASION

Eloflex HQ

Hammarbacken 4B  
191 49 Sollentuna  
SWEDEN